


**Dentemed**

BIOSEGURANÇA E TECNOLOGIA  
APLICADAS À ODONTOLOGIA

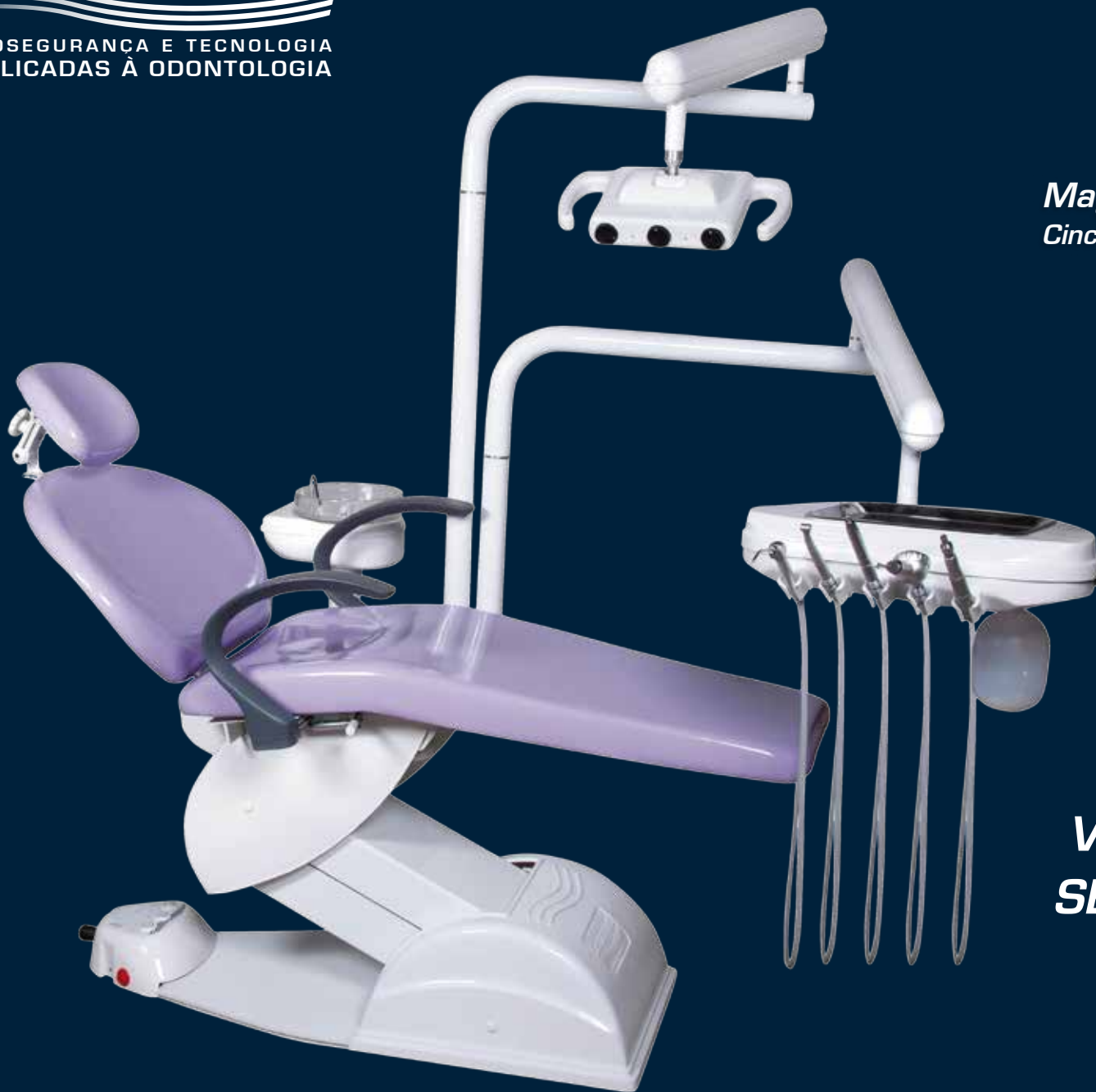

*Magnus Diamond Flex Pneumático ■*  
*Cinco pontas, refletor de LED, biarticulado*

**VALORIZANDO  
SEU CONFORTO**

CE

ISO  
13485

ISO  
9001

CREA

BRASIL  
GOVERNO FEDERAL

■ **Magnus Diamond Cart**



■ **Magnus Diamond Flex**



#### Cadeira Odontológica:

- 09 movimentos: 04 individuais e 05 automáticos (volta a zero e 03 posições de trabalho + Last Position -5° Trendelemburg);
- Pedal de comando acoplado a base com acionamento por botões e joystick.
- Encosto e assento confortável e anatômico de fácil higienização;
- Estrutura resistente e estável (dispensa fixação) com pintura lisa e branco dental, com tratamento anticorrosivo e antibacteriano e com a base com debrum antiderrapante;
- Sistema fuso de elevação (motoredutor isento de óleo): Tensão de Alimentação: 90 a 240 Vac — 50/60 Hz; força máx. de 600kg; certificado pela DEWERT/PTR (ISO 9001, ISO 14.001 e Rohs); suporta paciente de até 200kg;
- Botão vermelho de Stop Emergencial conforme a Norma Internacional IEC 60.601-3 (INMETRO).

#### Refletor:

- Luminosidade de 25.000 (+/- 15%), Lux a 6.000 (+/- 15%) selecionada em 04 intensidades; (Multifocal)
- Acendimento e desligamento sincronizado com as posições automáticas;
- Manopla removível para esterilização;
- Proteção do espelho multifacetado com sistema de bolha.

#### Equipo: Cart ou Flex

- Mesa em plástico resistente (proteção UV);
- Seringa triplice, com bico removível e autoclavável;
- Terminais bordem, para alta e baixa rotações;
- Sistema pneumático e automático para acionamento nos terminais;
- Reservatório de água;
- Suporte dos instrumentos com angulação de 45°;
- Pedal de comando, pneumático e progressivo
- Bandeja em aço inox, removível e autoclavável;
- Mangueiras lisas, arredondadas, leves e flexíveis.

#### Unidade Auxiliar:

- Estrutura resistente em plástico (proteção UV);
- Estrutura resistente com pintura lisa em branco dental;
- Cuba removível de altíssima resistência;
- Condutores de água em aço inox, removíveis e autoclaváveis;
- Sugador automático, com separador de detritos e tela em inox.
- Cuba em Porcelana ou Cerâmica ou BPT(Inquebrável);

CORES DISPONÍVEIS



#### PRATA

01 (uma) alavanca sublateral, regulagem longitudinal.



#### OURO

02 (duas) alavancas sublaterais, regulagem longitudinal e de inclinação.



#### OURO CROMADO

02 (duas) alavancas sublaterais, regulagem longitudinal e de inclinação, pés cromados e rodízios de silicone.

Accessórios e opcionais que podem ser incluídos:



Cabeçote do refletor com iluminação por LED



Braço rebatível/escamoteável com abertura



Encosto de cabeça biarticulado/multiarticulado



Terminal extra para alta rotação



Bandejas autoclaváveis



Pedal de comando móvel independente multifuncional



Fotopolimerizador de LED acoplado



Negatoscópio de LED acoplado



Porta-copo incorporado à unidade auxiliar



Segundo sugador incorporado à unidade auxiliar



Equipo com 5 pontas



Seringa tríplice incorporada à unidade auxiliar



Braço assistente



Rebatimento da unidade auxiliar com movimento de 90° a 180°



Tubulação totalmente embutida



Braço flex com travamento pneumático



Terminal de baixa rotação com sistema de refrigeração



Caixa de comando independente



Regulagem externa de água e ar do equipo



Reservatório de água com capacidade de 1.000 ml (1L)




Sistema de assepsia e desinfecção do equipo com válvula antirretração



Jato de bicarbonato e ultrassom acoplado



Kit suctor para bomba de vácuo

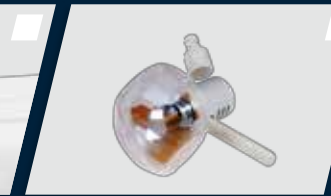

Refletor multifacetado com lâmpada de LED



Acionador sensorizado para água da unidade auxiliar com regulador de vazão



Cuba translúcida

A Dentemed reserva-se o direito de alterar os produtos sem aviso prévio.

Verifique quais itens são opcionais. Fotos ilustrativas.

As cores podem ter sofrido alterações na reprodução gráfica.

dentemed@dentemed.com.br

Tel.: (31) 3374-6768 Fax.: (31) 3377-7500 Cel.: (31) 99105-5435

R. Antônio Gravata, 136 A - Bairro Betânia. Belo Horizonte - MG. Cep: 30570-040.

**Dentemed**  
BIOSEGURANÇA E TECNOLOGIA  
APLICADAS À ODONTOLOGIA

80349600004